

222 / 223

Table d'examen réglable en hauteur

Ritter®
by MIDMARK



Guide de l'utilisateur

CE

003-1355-02 (Rév. B)

Identification produit du propriétaire

(Les renseignements ci-dessous sont requis lors d'un appel du service après-vente)

Numéro de modèle :

Numéro de série :

Date d'acquisition :


**Nom du propriétaire /
Organisation :**

Nom du revendeur :

**Numéro de téléphone du
revendeur :**


Société de service après-vente agréée Midmark :

222 / 622

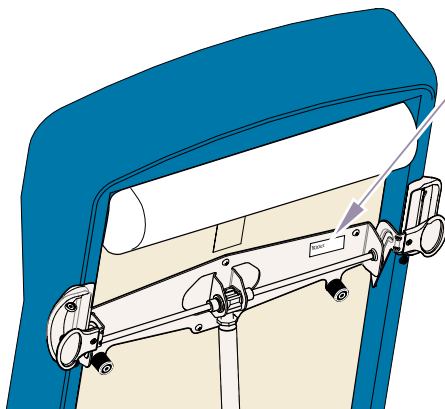

**Emplacement
des numéros de
série / modèle**

223 / 623

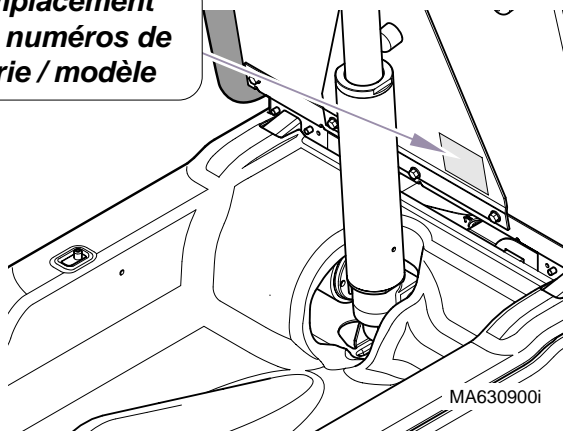

MA630900i

Table des matières

Renseignements importants

Symboles de sécurité	2
Restrictions / Utilisation	3
Placement du patient	3
Interférences électromagnétiques	3
Représentant CE autorisé	3
Transport et conditions de stockage	3
Consignes de sécurité	4

Fonctionnement

Montée/descente de la table	5
Réglage du dossier :	
<i>modèle 222</i>	6
<i>modèle 223</i>	7
Tiroir Exam Assistant™	8
Pose du rouleau de papier et des sangles de maintien	9
Étriers	10
Repose-pied et cuvette	11
Élément chauffant du tiroir (<i>en option</i>)	11
Surélévation du bassin	12
Prise de courant double	13

Maintenance

Nettoyage	14
Entretien préventif	14
Service après-vente	14

Accessoires

Liste des accessoires autorisés	15
---------------------------------------	----

Caractéristiques



Poids, dimensions, caractéristiques électriques	16
Tableau de conformité à la réglementation :	
<i>modèle 222</i>	17
<i>modèle 223</i>	18
Latitude de placement et dimensions	19













Renseignements sur la garantie

Garantie limitée	20
------------------------	----

Renseignements importants

Symboles de sécurité

	Attention Signale un danger potentiel qui doit être évité, sous peine de blessures graves.
	Avertissement matériel Signale un danger potentiel qui doit être évité, sous peine d'endommagement du matériel.
Remarque Attire l'attention sur une procédure, une pratique ou une situation.	

	Consulter le guide de l'utilisateur pour des renseignements importants.		Conserver au sec
	Orientation correcte pour transport		Nombre maximum de palettes empilées
	Fragile		Calibre des fusibles
	Type B, matériel industriel		Tension dangereuse / risque d'électrocution
	Mise à la terre de protection		Protégé contre les ruissellements d'eau
	Cycle d'utilisation (cycle du moteur) : 30 secondes de marche, 5 minutes d'arrêt		
	Matériel médical UL2601-1, 94XM de Midmark Corporation	<i>Ce produit a été testé quant aux risques d'électrocution, d'incendie et de dangers mécaniques uniquement, selon les normes UL2601-1 et CAN/CSA C22.2 NO. 601.1</i>	

Restrictions / Utilisation

Ce produit est destiné à être utilisé comme une chaise ou une table afin de permettre le placement et le support du patient lors d'une procédure ou d'un examen général exécuté par un professionnel de la santé qualifié.

Placement du patient

Cette table est prévue pour les positions d'examen suivantes :

- Décubitus ventral
- Décubitus dorsal
- Décubitus latéral
- Gynécologique

Alimentation électrique



Attention

La plupart des pièces métalliques nues de la table sont mises à la masse. Avant une cautérisation ou un traitement similaire, le patient doit impérativement être isolé de toutes les parties métalliques de la table à l'aide de matériaux non-conducteurs pour éviter tout risque de brûlure ou d'électrocution.

Interférences électromagnétiques

Cette table d'examen Midmark a été conçue et construite de façon à minimiser les interférences électromagnétiques avec les autres appareils. Si des interférences sont néanmoins constatées, il est nécessaire de retirer de la pièce l'appareil provoquant l'interférence et/ou de brancher la table sur un circuit isolé.

Représentant CE autorisé

Au sein de l'Union Européenne, tous les problèmes, plaintes ou questions doivent être adressés au représentant CE autorisé de Midmark indiqué ci-dessous :

Promotal
22, Rue De St. Denis
53500 Ernée,
FRANCE
Téléphone : 33-2-430-517-76
Télécopie : 33-2-430-569-10

Transport et conditions de stockage

Température ambiante : +5 °C à +38 °C (+41 °F à 100 °F)
Humidité relative de 10 % à 90 % (sans condensation)
Pression atmosphérique 0,5 bar à 1,05 bar (500 hPa à 1060 hPa)

Consignes de sécurité





Attention

Avant d'abaisser la table d'examen, vérifiez qu'il n'y a rien sur le sol en dessous et autour. Si de gros objets venaient à être coincés sous le repose-pied ou la garniture matelassée, la table risquerait de se renverser.

Lorsque la table est abaissée au maximum [45,7 cm (18 in)], l'espace entre le bas du tiroir et le sol est d'environ 9 cm (3,5 in). Éloignez le patient (*notamment ses pieds*) et tout objet de cette zone avant d'abaisser la table d'examen.

Si la table d'examen ne fonctionne pas correctement, relâchez immédiatement la pédale, débranchez le cordon d'alimentation et aidez le patient à descendre de la table. Si la table ne fonctionne toujours pas correctement, appelez le service après-vente.

Il est impératif de respecter ces instructions pour éviter toute blessure au patient et tout dommage matériel.

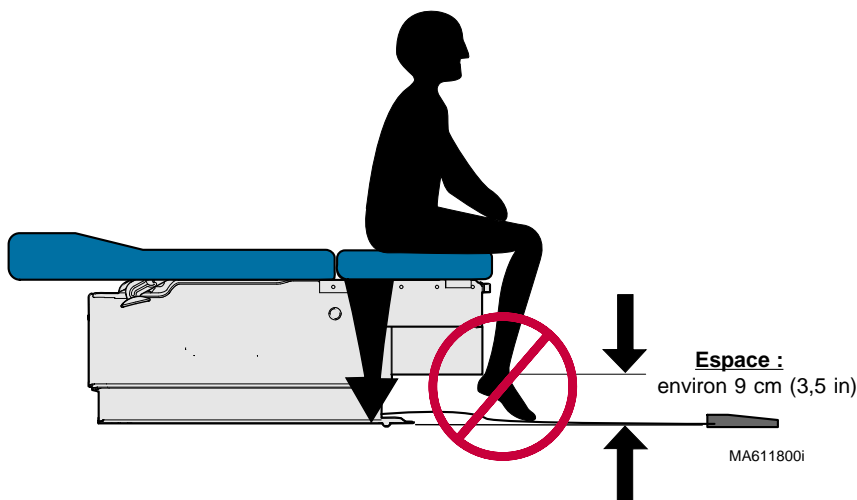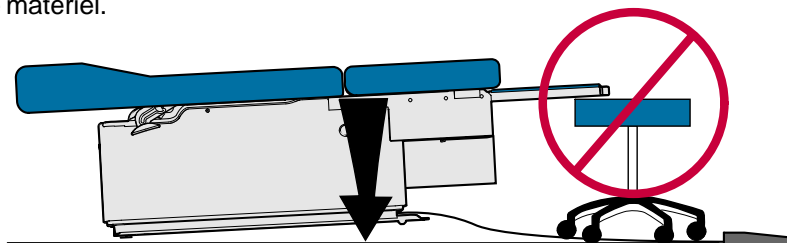




Fonctionnement

Réglage de la hauteur de la table

Remarque

La table s'arrête automatiquement lorsqu'elle atteint sa hauteur extrême de relevage ou d'abaissement.

Pour relever ou abaisser la table...
Appuyez sur le bouton voulu.

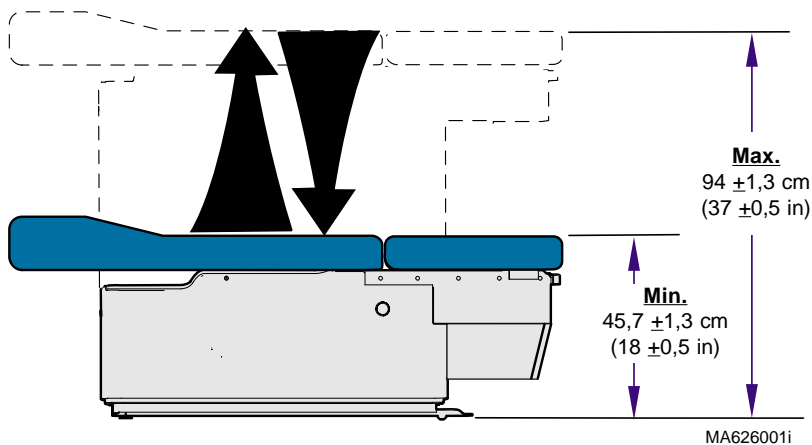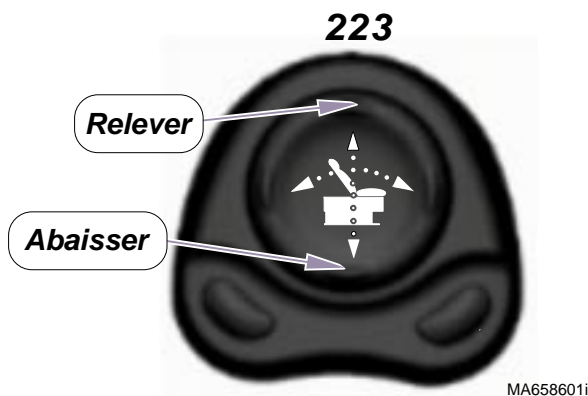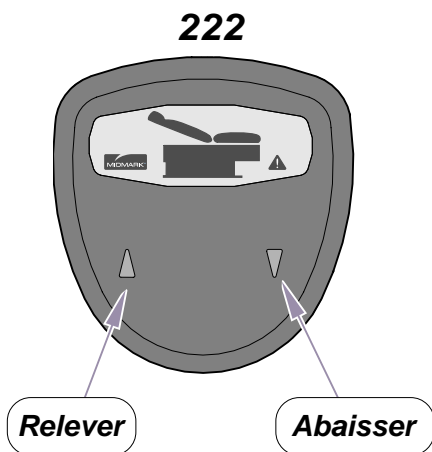


Réglage du dossier - 222

Pour positionner le dossier...

- A. Serrez la poignée de relâchement du dossier (d'un côté de la table).***
- B. Positionnez le dossier.***
- C. Relâchez la poignée pour bloquer le dossier.***

Latitude de placement
de 0° (horizontal) à
+80° ±5°

***Poignée de relâchement
du dossier***

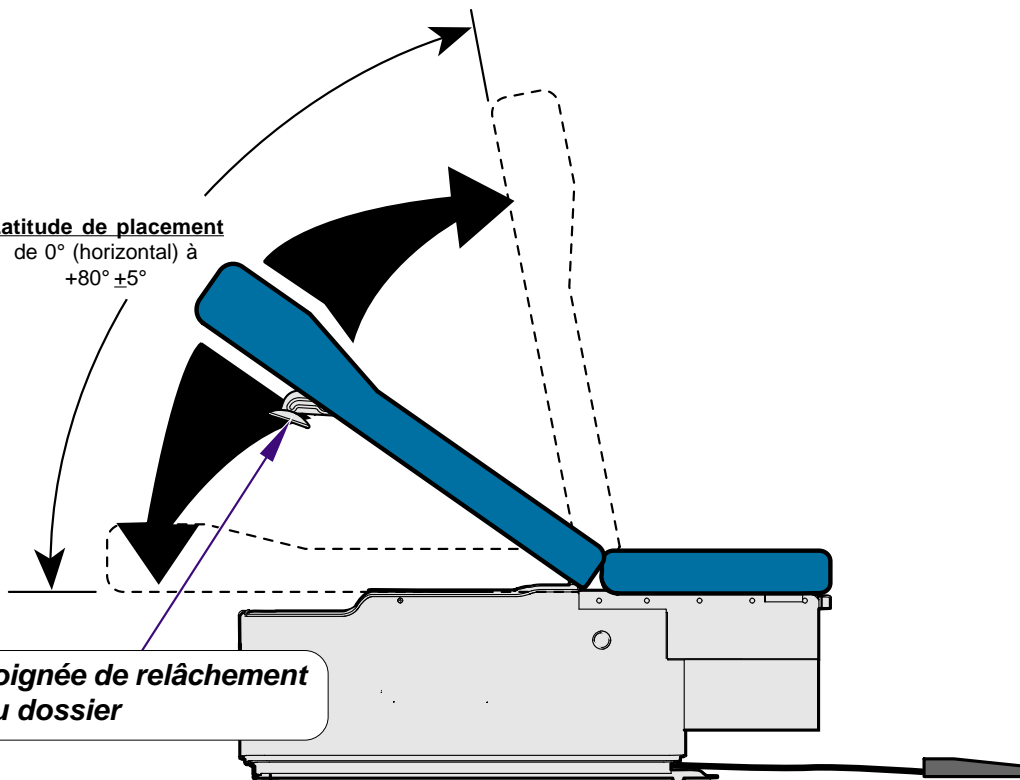

MA600300i

Réglage du dossier - 223

Remarque


Le dossier s'arrête automatiquement lorsqu'il atteint sa hauteur extrême de relevage ou d'abaissement.

Pour positionner le dossier...

Maintenir enfoncé le bouton approprié.


Abaissér

Relever

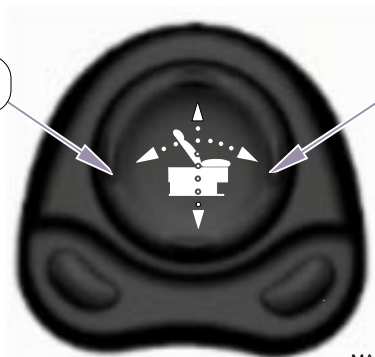

MA658601i

Latitude de placement
de 0° (horizontal) à
 $+80^{\circ} \pm 5^{\circ}$

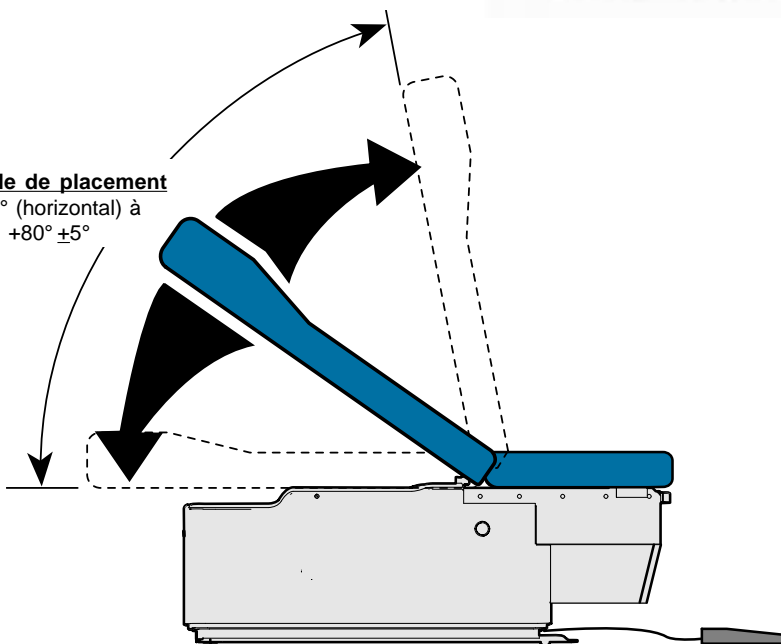


MA626201i

Tiroir Exam Assistant™

Pour utiliser le panneau avant du tiroir comme étagère...

Abaissez le panneau avant du tiroir pour relâcher le verrou magnétique.

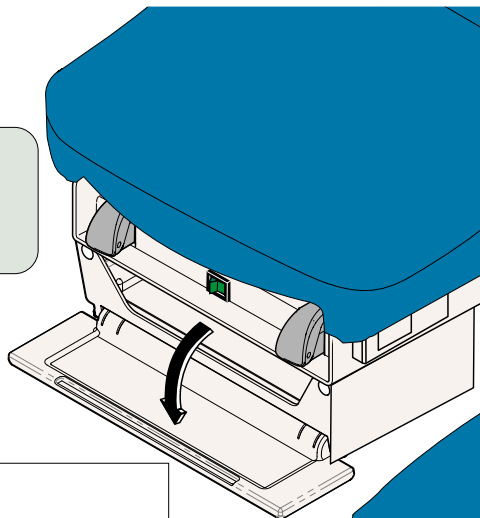


Avertissement matériel

Le tiroir supporte un poids maximum de 4,5 kg (10 lb).

Languettes

Si le panneau avant du tiroir plie vers le bas...

Appuyez sur les deux languettes et ramenez le panneau avant à l'horizontale.

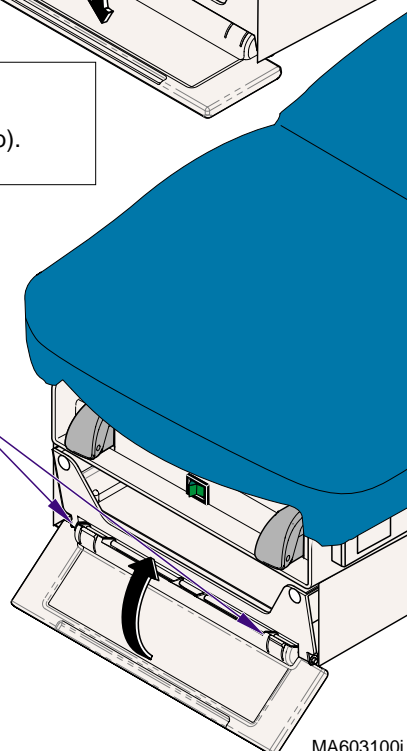

MA603100i

Pose du rouleau de papier et des sangles de maintien


Remarque

Vous pouvez stocker jusqu'à quatre rouleaux de papier sous le dossier.


Dimensions maximales du rouleau de papier 53,3 cm de long x 8,9 cm de diamètre
(21 in x 3,5 in)

Pour installer le rouleau de papier...

Insérez les extrémités de la tige dans les encoches sous l'extrémité "tête" de la garniture matelassée.

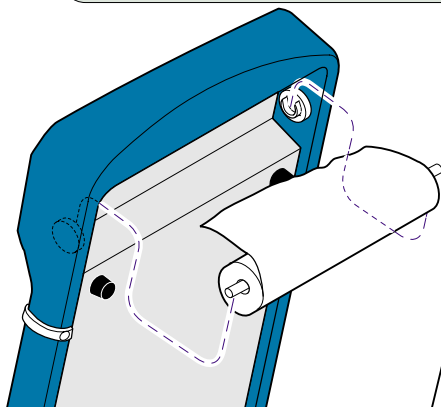


***Garniture coupée et
cousue***

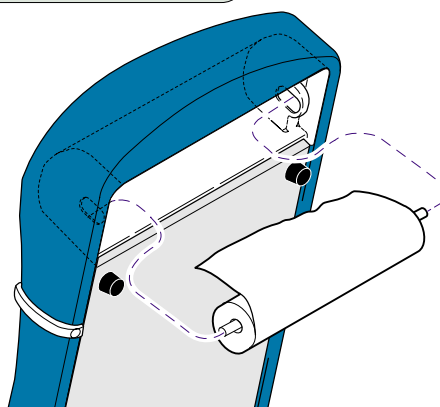

Garniture sans coutures

Pour installer les sangles de maintien...

Fixez les sangles de maintien aux accroches situées de chaque côté de la table.

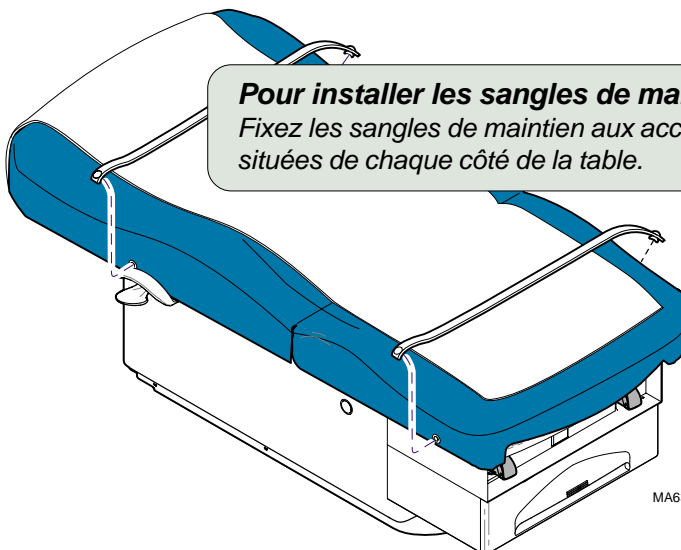

MA631300i

Étriers




Attention

Pour éviter au patient de se blesser, vérifiez que les étriers sont bien en place et bloqués avant de les utiliser. Les étriers ne peuvent pas supporter le poids du patient.

Pour positionner les étriers...

- A.** Tirez les étriers et dépliez-les.*
- B.** Soulevez légèrement l'étrier, puis déplacez-le vers la droite ou la gauche.*
- C.** Relâchez l'étrier pour le bloquer dans la position souhaitée.*

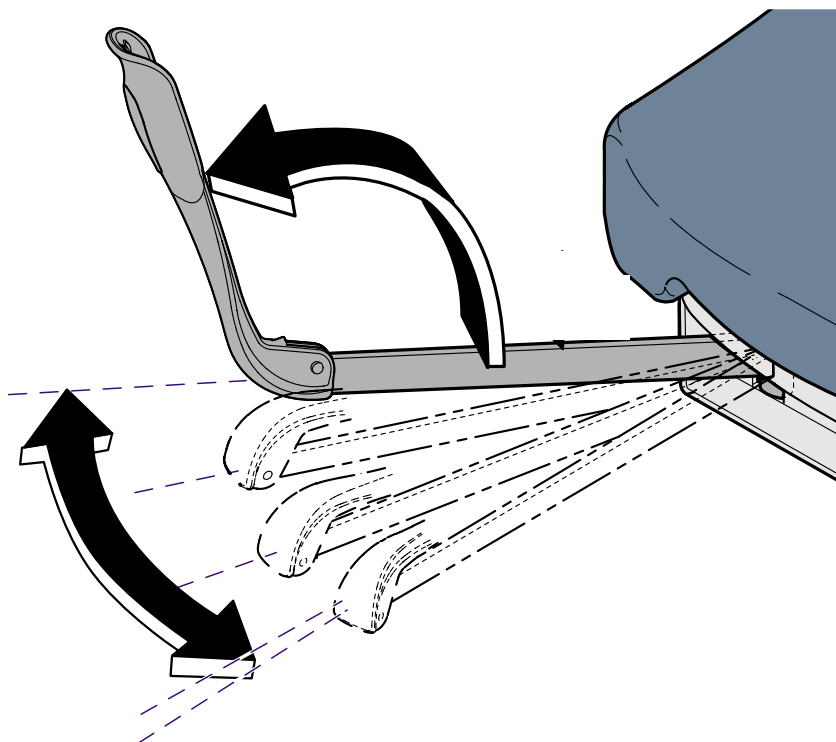


MA602500i

Repose-pied et cuvette



Attention

Le repose-pied n'est pas prévu pour supporter le poids du patient.

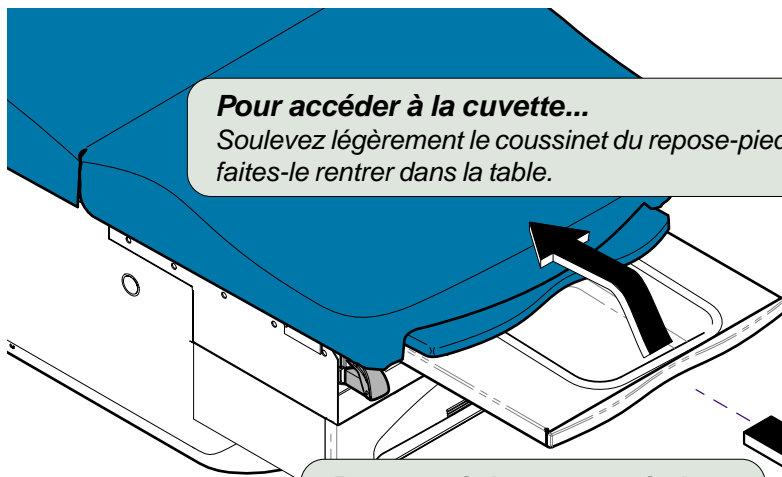


Pour accéder à la cuvette...

Soulevez légèrement le coussinet du repose-pied, puis faites-le rentrer dans la table.

Pour sortir le repose-pied...

Sortez le repose-pied jusqu'à la position désirée.

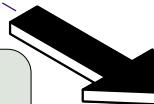

MA626400i

Élément chauffant du tiroir (en option)

Remarque


L'interrupteur est allumé lorsque l'élément chauffant est en marche (I).

L'élément chauffant du tiroir maintient le contenu du tiroir à une température d'environ 37 °C (98 °F).


Pour mettre en marche / arrêter l'élément chauffant du tiroir...

Mettez l'interrupteur de l'élément chauffant dans la position voulue.

Marche

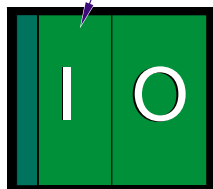

Arrêt

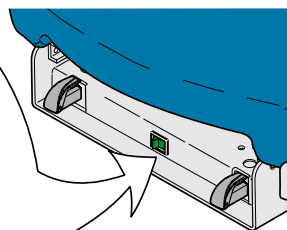


MA603200i

Surélévation du bassin (en option)


Pour surélever l'assise...

Soulevez l'assise jusqu'à ce que la barre de support se soulève.

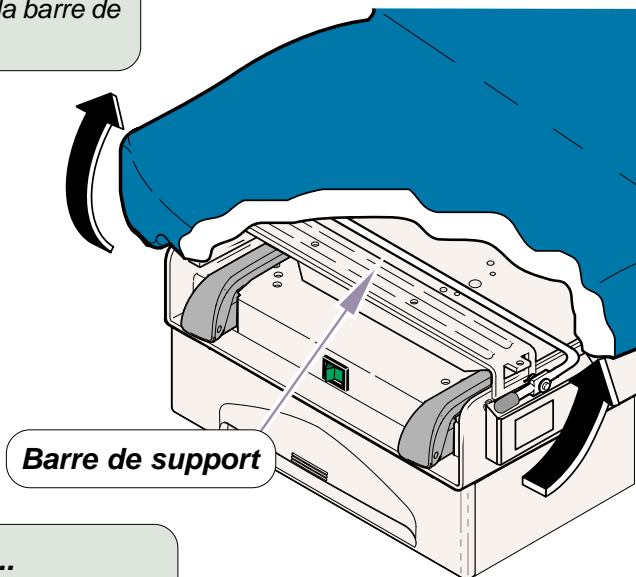

Pour remettre l'assise à plat...

- A.** Soulevez légèrement l'assise.
- B.** Poussez la barre de support vers l'extrémité "tête" de la table.
- C.** Relâchez l'assise.

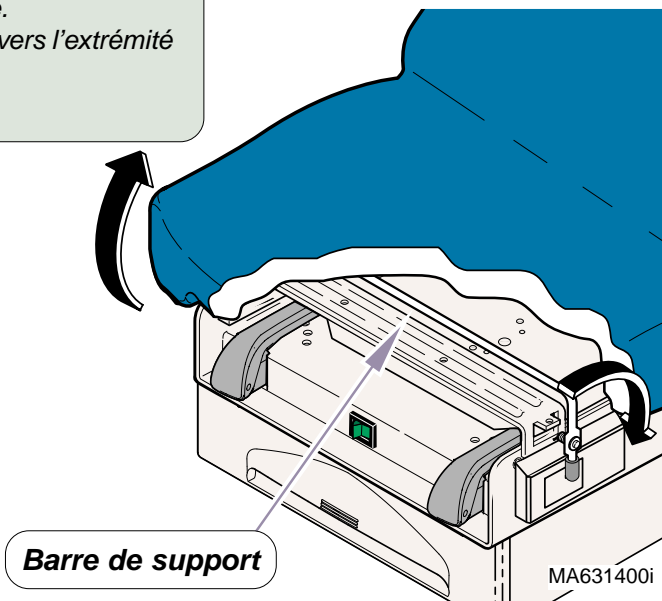

MA631400i

Prise de courant double


(en option - non disponible sur les modèles en 230 V)

La prise de courant double permet le branchement des accessoires utilisés lors des interventions. Lorsque la charge maximale est dépassée, le disjoncteur de la table *[situé sous l'assise]* coupe l'alimentation de la prise de courant.

Charge maximale *[total pour les deux prises]* : 115 V c.a., 5 A

Pour réarmer le disjoncteur...

Appuyez sur l'interrupteur du disjoncteur.

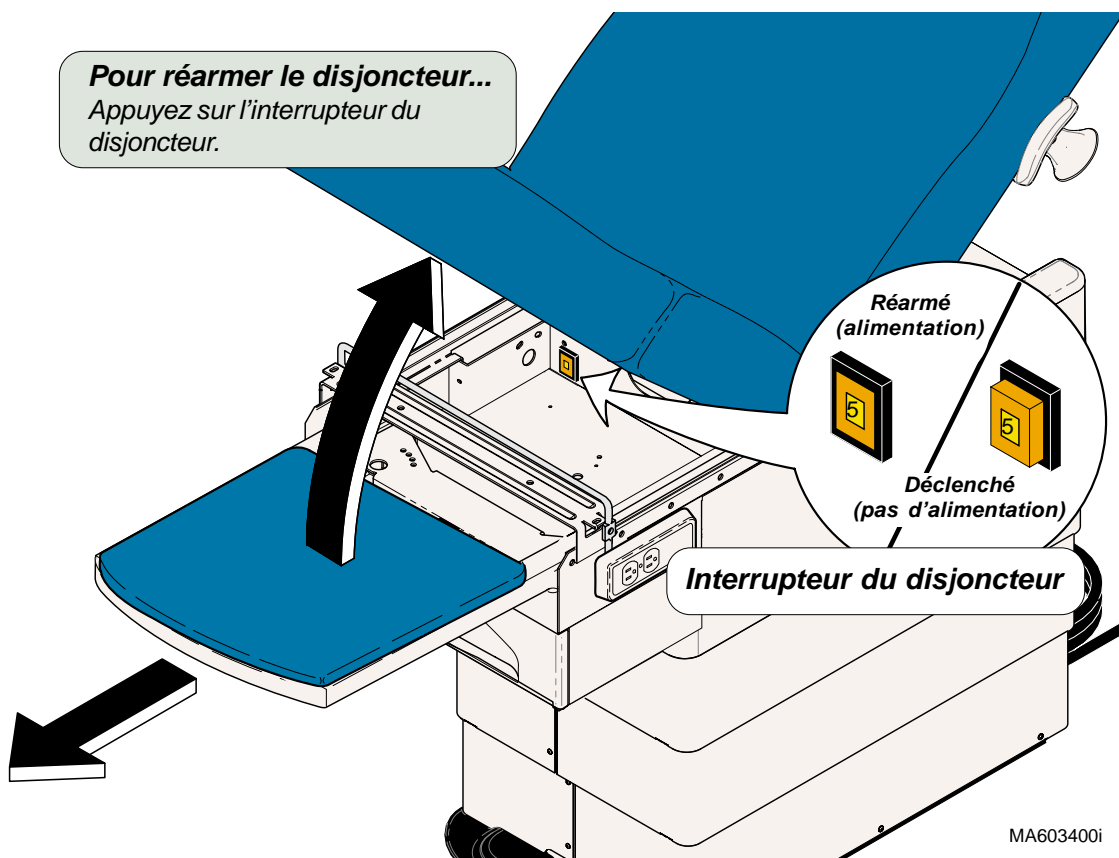

MA603400i

Renseignements importants

Nettoyage

Nettoyez la garniture avec une solution d'eau de javel à 5 %.



Avertissement matériel

La garniture matelassée résiste à la plupart des tâches d'origine médicale, mais risque d'être endommagée par les solvants et les teintures. Essayez immédiatement tout liquide renversé sur la garniture.

Chaque semaine, essuyez les surfaces plastiques et métalliques peintes de la table à l'aide d'un chiffon doux propre et d'un détergent doux. Cirez régulièrement ces surfaces avec une cire pour meubles afin de faciliter le nettoyage et de préserver le lustre de la table.

Entretien préventif

Examinez périodiquement les zones suivantes :

- Le cordon d'alimentation ne doit présenter aucune coupure ou autre dommage matériel.
- Toutes les fixations doivent être en place et bien attachées.
- Tous les dispositifs mécaniques doivent fonctionner correctement.

Lubrifiez périodiquement les zones suivantes pour que la table fonctionne bien, sans faire de bruit :

- Charnière arrière (*huile lubrifiante légère*)
- Conduits de coulissement du repose-pied (*cire pour meubles*)

Faites inspecter la table d'examen tous les six mois par un technicien agréé.

Service après-vente

Remarque

Vous devez préciser le numéro de modèle et le numéro de série lorsque vous contactez le service après-vente.

Contactez votre revendeur Midmark, ou consultez le site www.midmark.com pour obtenir les coordonnées du service après-vente le plus proche. Pour contacter directement Midmark :

1-800-Midmark (1-800-643-6275) ou +1-937-526-3662
de 8h00 à 17h00, du lundi au vendredi (heure normale de l'Est des États-Unis)
[sauf les jours fériés américains]

Accessoires

Liste des accessoires autorisés

Les accessoires autorisés avec cette table sont répertoriés ci-dessous :

Nom de l'accessoire	Référence	Restrictions / Utilisation
Appui procto	9A04001	Utilisation : fournit un support au patient et permet son placement lors d'un examen proctologique.
Cuvette en acier	9A70000	Utilisation : récupération du liquide répandu lors des interventions urologiques.
Cuvette urologique avec tuyau	9A104001	Utilisation : récupération du liquide répandu lors des interventions urologiques.
Supports de genoux	9A319002	Utilisation : fournit un support aux genoux et aux jambes du patient.
Bride/Support uniquement (pour supports de genoux)	9A319003	Utilisation : permet de fixer les supports de genoux à la table.
Articulation Supports de genoux	9A320001	Utilisation : fournit un support aux genoux et aux jambes du patient.
Stockage arrière	9A313001	Utilisation : fournit un espace de stockage supplémentaire dans la table d'examen.
Bras réglables	9A314001	Utilisation : fournit un support au patient pendant qu'il monte ou descend de la table.
Support de lampe Welch-Allyn	9A315002	Utilisation : accrochage d'une lampe Welch-Allyn à la table d'examen.

Caractéristiques

Poids, dimensions, caractéristiques électriques

Poids maximum du patient	181,4 kg (400 lb)
Dimensions maximales du rouleau de papier :	53,3 de long x 8,9 cm de diamètre (21 in x 3,5 in)
Latitude de placement et dimensions	(voir la section <i>Latitude de placement et dimensions</i>)
Poids de la table :	
<i>[modèles 230 V uniquement : ajouter 6,5 kg (14,5 lb) pour un transformateur de 230 V]</i>	
222 / 223	147 kg (325 lb)
avec palette d'expédition	193 kg (375 lb)
Cordon d'alimentation :	244 cm (8 ft)
Alimentation électrique :	[Tableau de conformité à la réglementation]
Alimentation de la pédale de commande :	14 V c.a., SELV (Tension extra-basse de sécurité)
Prise de courant double (en option)	
Charge maximale :	115 V c.a., 5 A
Fusibles :	
<u>modèles 115/230 V c.a. :</u>	
F1 et F2 (sur carte principale PC)	10 A, 250 V, temporisés, 6 mm x 32 mm (0,25 in x 1,25 in)
F3 (sur carte principale PC)	5 A, 250 V, temporisé, 6 mm x 32 mm (0,25 in x 1,25 in)
F4 (sur carte principale PC)	187 mA, 250 V, temporisé, 6 mm x 32 mm (0,25 in x 1,25 in)
<u>Modèles à chauffage de tiroir (en option)</u>	
Fusibles de carte d'alimentation (2)	0,8 A, 250 V, temporisés, 5 x 20 mm
<u>Modèles 230 V c.a. uniquement :</u>	
situés à côté de la prise CEI (2)	4 A, 250 V, temporisés, 5 x 20 mm
Cycle de fonctionnement (cycle du moteur) :	Fonctionnement par intermittence [30 secondes de marche / 5 minutes d'arrêt]
Classifications :	Classe 1, article industriel type B, équipement ordinaire, fonctionnement par intermittence
Protection contre la pénétration des liquides :	IPX1
Conformité aux normes :	[Tableau de conformité à la réglementation]
<i>Ce matériel ne convient pas à l'utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable à l'air, à l'oxygène ou au protoxyde d'azote.</i>	

Tableau de conformité à la réglementation - 222

Cote de résistance au feu : Toutes les garnitures sont conformes aux normes du California Bureau of Home Furnishing Technical Bulletin 117 Des garnitures conformes aux normes du California Bureau of Home Furnishing Technical Bulletin 133 sont disponibles en option.




Modèle	Description	Préfixe du numéro de série	Conforme aux normes :						Alimentation électrique :		
			UL 60601	CAN/CSA 22.2, #601.1-M90	UL 544	EN 60601-1-2 (EMC)	EN 60601-1	CE	V c.a. = /- 10 %	A	Cycles (Hz)
222-001	Table Ritter Basic (garniture standard)	RG, V	X	X		X	X	X	115	5.5	50/60
222-002	Table Ritter Basic avec prise de courant (garniture standard)	RH, V			X	X		X	115	10.5	50/60
222-003	Table Ritter Basic avec chauffage de tiroir, surélévation du bassin (garniture standard)	RJ, V	X	X		X	X	X	115	6	50/60
222-004	Table Ritter Basic avec prise de courant, surélévation du bassin, chauffage de tiroir (garniture standard)	RK, V			X	X		X	115	11	50/60
222-005	Table Ritter Basic (garniture sans coutures)	RG, V	X	X		X	X	X	115	5.5	50/60
222-006	Table Ritter Basic avec prise de courant (garniture sans coutures)	RH, V			X	X		X	115	10.5	50/60
222-007	Table Ritter Basic avec chauffage de tiroir, surélévation du bassin (garniture sans coutures)	RJ, V	X	X		X	X	X	115	6	50/60
222-008	Table Ritter Basic avec prise de courant, surélévation du bassin, chauffage de tiroir (garniture sans coutures)	RK, V			X	X		X	115	11	50/60
222-009	Table Ritter Basic Export avec surélévation du bassin (garniture sans coutures)	RL, V				X	X	X	230	2.75	50/60
222-010	Table Ritter Basic Export avec prise de courant (garniture sans coutures)	RM, V				X	X	X	230	3	50/60
222-011	Table Ritter Basic - Canada avec prise de courant (garniture standard)	V		X		X		X	115	10.5	50/60
222-012	Table Ritter Basic - Canada avec prise de courant, surélévation du bassin, chauffage de tiroir (garniture standard)	V		X		X		X	115	11	50/60
222-013	Table Ritter Basic - Canada avec prise de courant (garniture sans coutures)	V		X		X		X	115	10.5	50/60
222-014	Table Ritter Basic - Canada avec prise de courant, surélévation du bassin, chauffage de tiroir (garniture sans coutures)	V		X		X		X	115	11	50/60

Tableau de conformité à la réglementation - 223

Cote de résistance au feu : Toutes les garnitures sont conformes aux normes du California Bureau of Home Furnishing Technical Bulletin 117 Des garnitures conformes aux normes du California Bureau of Home Furnishing Technical Bulletin 133 sont disponibles en option.

Modèle	Description	Préfixe du numéro de série	Conforme aux normes :						Alimentation électrique :		
			UL 2601	CAN/CSA 22.2, #601.1-M90	UL 544	EN 60601-1-2 (EMC)	EN 60601-1	CE	V c.a. = /- 10 %	A	Cycles (Hz)
223-001	Table Ritter à dossier électrique (garniture standard)	SC, V	X	X		X	X	X	115	7	50/60
223-002	Table Ritter à dossier électrique avec prise de courant (garniture standard)	SD, V			X	X		X	115	12	50/60
223-003	Table Ritter à dossier électrique avec chauffage de tiroir, surélévation du bassin (garniture standard)	SE, V	X	X		X	X	X	115	7.5	50/60
223-004	Table Ritter à dossier électrique avec prise de courant, surélévation du bassin, chauffage de tiroir (garniture standard)	SF, V			X	X		X	115	12.5	50/60
223-005	Table Ritter à dossier électrique (garniture sans coutures)	SC, V	X	X		X	X	X	115	7	50/60
223-006	Table Ritter à dossier électrique avec prise de courant (garniture sans coutures)	SD, V			X	X		X	115	12	50/60
223-007	Table Ritter à dossier électrique avec chauffage de tiroir, surélévation du bassin (garniture sans coutures)	SE, V	X	X		X	X	X	115	7.5	50/60
223-008	Table Ritter à dossier électrique avec prise de courant, surélévation du bassin, chauffage de tiroir (garniture sans coutures)	SF, V			X	X		X	115	12.5	50/60
223-009	Table Ritter Export à dossier électrique avec surélévation du bassin (garniture sans coutures)	SG, V				X	X	X	230	3.75	50/60
223-010	Table Ritter Export à dossier électrique avec prise de courant (garniture sans coutures)	SH, V				X	X	X	230	4	50/60
223-011	Table Ritter à dossier électrique- Canada avec prise de courant (garniture standard)	V		X		X		X	115	12	50/60
223-012	Table Ritter à dossier électrique- Canada avec prise de courant, surélévation du bassin, chauffage de tiroir (garniture standard)	V		X		X		X	115	12.5	50/60
223-013	Table Ritter à dossier électrique- Canada avec prise de courant (garniture sans coutures)	V		X		X		X	115	12	50/60
223-014	Table Ritter à dossier électrique- Canada avec prise de courant, surélévation du bassin, chauffage de tiroir (garniture sans coutures)	V		X		X		X	115	12.5	50/60

Latitude de placement et dimensions

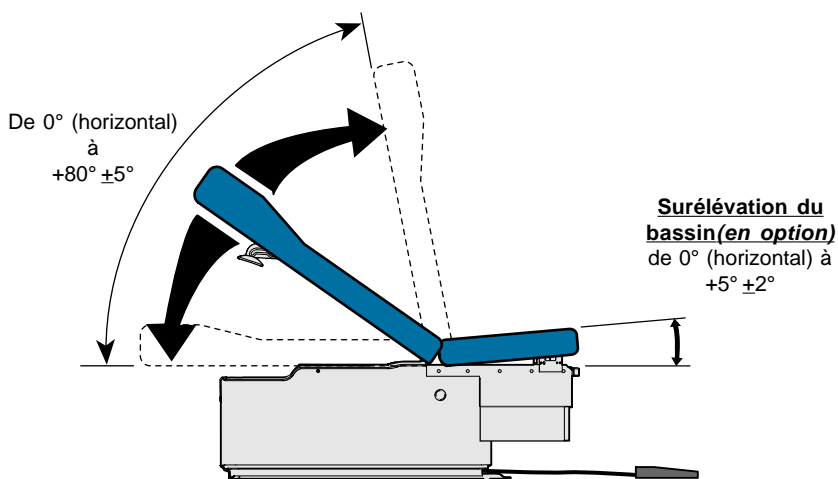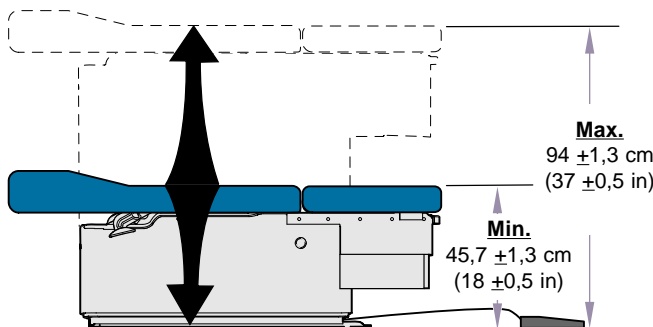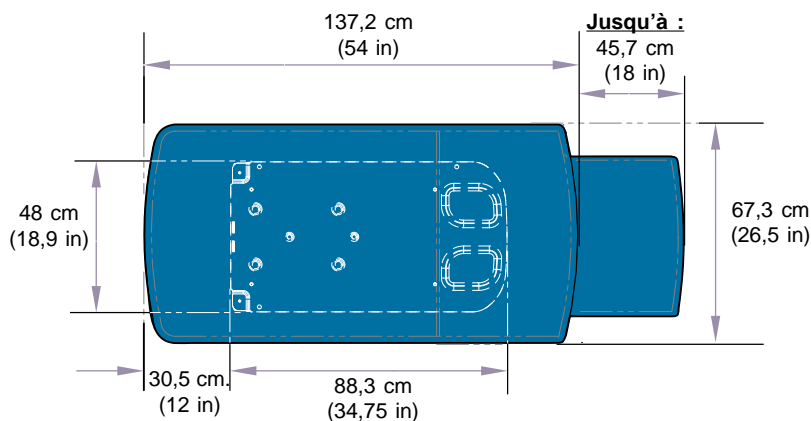

MA599801i

Renseignements sur la garantie

Garantie limitée

LIMITATION DE GARANTIE

Midmark Corporation (" Midmark ") garantit à l'acquéreur initial que ses nouveaux produits et composants Alternate Care (à l'exception des pièces non garanties sous la rubrique " Exclusions ") fabriqués par Midmark sont exempts de défauts de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. L'obligation de Midmark au titre de cette garantie est la réparation ou le remplacement, à la discrétion de Midmark, des pièces ou des produits dont les défauts ont été signalés à Midmark au cours de la période de garantie applicable et une fois que l'examen effectué par Midmark a prouvé l'existence de ces défauts.

PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE

La période de garantie applicable est d'un (1) an pour tous les produits et composants couverts par la garantie, à compter de la date de livraison à l'acquéreur initial.

EXCLUSIONS

Midmark ne peut être tenu responsable des cas suivants, qui ne sont pas couverts par la garantie : (1) des réparations et remplacements dus à une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, une négligence, une modification, un accident, des dommages liés au transport ou une altération ; (2) des produits qui ne sont pas installés, utilisés et correctement nettoyés selon les instructions du manuel d'installation ou d'installation/ utilisation de Midmark pour le produit en question. (3) des produits considérés consommables ; (4) des produits ou des pièces non fabriqués par Midmark; (5) des frais encourus pour les réglages, les réparations et le remplacement de pièces, l'installation ou tout autre travail effectué sur ou en rapport avec de tels produits sans l'autorisation expresse écrite préalable de Midmark.

RECOURS EXCLUSIF

L'unique obligation de Midmark sous cette garantie est la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses. Midmark ne peut être tenu responsable pour tout dégât ou retard direct, spécial, indirect, fortuit, exemplaire ou conséquent y compris mais sans s'y limiter, les dégâts entraînant la perte de bénéfice ou d'utilisation.

DÉNI D'AUTORISATION

Aucune personne ou société n'est autorisée à créer d'autres obligations ou responsabilités pour Midmark en rapport avec les produits.

CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE DE MIDMARK ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES. MIDMARK N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE IMPLICITE D'AUCUNE SORTE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. CETTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT. DES PIÈCES DÉFECTUEUSES.